

MDI 定量吸入劑

用藥指導

李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院
藥劑科 關心您




藥物諮詢專線：04-26862288轉3117
李綜合醫療社團法人大甲李綜合醫院

MDI 定量吸入劑使用方法


Berotec® N MDI 備勞喘定量噴霧劑
Seretide® Evohaler 使肺泰憂氣吸入劑

使用方法：

1. 移去護蓋。

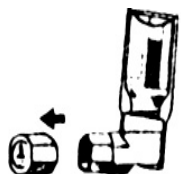

2. 將吸入輔助器較粗的一端，與吸入器口連接。

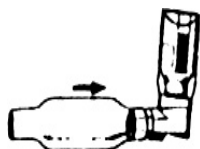


3. 將蓋子與吸入輔助器較細一邊連接。



4. 上下搖動吸入器使藥品充份混合，並確認連接處是否緊密。



5. 以食指緊壓噴霧罐底部，按壓一次並確認有藥物噴出在輔助器器內。

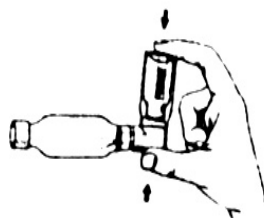

先呼氣然後除去護蓋並立刻含住輔助器，以正常呼吸速度深深吸入藥品。



7. 閉氣至少 5~10 秒。
8. 若要使用第二個劑量，請等一分鐘後再重覆 3~7 步驟。
9. 每週定期清洗吸入輔助器、噴嘴及含口器，避免阻塞。

如何檢查剩下的藥量？

將藥罐放入水槽內，然後觀察藥罐停留水內的位置來決定

